

Angelcare®

PARA SU TRANQUILIDAD


MANUAL DEL PROPIETARIO

MONITOR DE MOVIMIENTOS Y SONIDOS

Modelo AC403

Preprogramado
para detectar sonido
y movimiento.
El detector de
movimientos avisará
si no detecta
movimiento



 ADVERTENCIAS.....	61
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MONITOR AC403	66
PASO 1: Carga de la unidad de los padres (15 horas).....	67
PASO 2: Instalación del detector de movimientos.....	69
PASO 3: Instalación de la unidad del bebé.....	72
PASO 4: Encendido del monitor.....	73
PASO 5: Prueba y conocimiento del monitor	75
PASO 6: Activación y desactivación de funciones adicionales	83
Resolución de problemas.....	84
Garantía limitada.....	86
Especificaciones técnicas	87

MANUAL DEL USUARIO

CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA FUTURA REFERENCIA.

LEA DETENIDAMENTE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR EL PRODUCTO.

SI NO RESPETA LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES GRAVES, LA MUERTE O DAÑOS EN EL PRODUCTO.

EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS NO ESTÁ DESTINADO AL USO CON ADULTOS O NIÑOS DE MÁS DE 24 MESES.

EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO PARA DETERMINAR SI EL NIÑO ESTÁ AFUERA DE LA CUNA.

ADVERTENCIA

Es necesario que un adulto realice el montaje.

Cuando realice el montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

En Angelcare® respaldamos todos nuestros productos.

Si no está totalmente satisfecho o tiene preguntas, contáctenos;

EE. UU. y Canadá: comuníquese con nosotros a través del correo electrónico:


angelcare@cdecinc.ca;

los demás países: contacte su distribuidor local.

⚠ ADVERTENCIAS

1. ESTE PRODUCTO NO PUEDE REEMPLAZAR LA SUPERVISIÓN RESPONSABLE DE UN ADULTO. Este producto está diseñado para ayudar en la supervisión de su bebé. Aun cuando use el monitor, debe proporcionar la supervisión necesaria para la continua seguridad de su hijo. La supervisión de bebés prematuros, o aquellos que se consideran en riesgo, siempre debe llevarse a cabo bajo el seguimiento de un profesional de la salud. Este monitor no está destinado a un uso médico.

2. ADVERTENCIA Peligro de estrangulación — Ha habido casos de niños que se han ESTRANGULADO. Mantenga los cables de

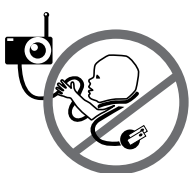

los adaptadores fuera del alcance de los niños (a una distancia mínima de 0.9 m [3 pies]). **NUNCA** use el detector de movimientos sin la cobertura de protección del cable.

Verifique la cobertura de protección antes de cada uso. Si la cobertura de protección se encuentra dañada o rota, suspenda inmediatamente el uso del detector de movimientos.

3. Nunca utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice ÚNICAMENTE los adaptadores de CA suministrados.

4. Cuando el adaptador de CA está enchufado a un tomacorriente, NO toque el extremo opuesto.

5. Compruebe SIEMPRE de que tanto el transmisor como el receptor funcionan correctamente y ambos están dentro del radio de alcance del otro. Pruebe el monitor antes del primer uso, periódicamente y al cambiar la ubicación la unidad del bebé.

6. Compruebe SIEMPRE el estado del bebé inmediatamente cuando suene la alarma.

7. NO utilice el monitor junto al agua (por ejemplo, cerca de la bañera, del lavabo, etc.).



8. Mantenga el monitor ALEJADO de fuentes de calor (como cocinas, radiadores, etc.).

9. SIEMPRE coloque tanto la unidad del bebé como la unidad para los padres sobre una superficie plana, en posición vertical que permite la ventilación adecuada. NO coloque el producto sobre sofás, cojines, camas, etc., que podrían impedir la ventilación.

10. Este monitor utiliza ondas públicas de radio para transmitir señales. La unidad para los padres puede captar señales o interferencias de otros monitores de bebés de su zona. Las señales de su monitor hasta pueden ser captadas en otras viviendas. Para proteger su esfera privada, asegúrese de que ambas unidades estén APAGADAS (OFF) cuando no se encuentran en uso. Si capta interferencias, cambie el canal de ambas unidades.

11. Este producto NO es un juguete. NO permita que los niños jueguen con él.

12. Este producto contiene piezas pequeñas. Es necesario que un adulto realice el montaje. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto y mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

13. Utilice y almacene el monitor a una temperatura entre 10 °C (50 °F) y 40 °C (104 °F).

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

14. Utilice SOLO baterías RECARGABLES tipo AAA en la unidad para los padres. NO mezcle baterías nuevas y usadas. NO mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables. Inserte las baterías con la polaridad

correcta. NO provoque un cortocircuito en los terminales de alimentación. Utilice ÚNICAMENTE las baterías recomendadas o elementos equivalentes (voltios y tamaño) y el adaptador correcto. Quite las baterías cuando el producto se vaya a guardar durante largos periodos de tiempo o cuando las baterías se hayan agotado. Elimine las baterías agotadas adecuadamente. NO recargue baterías no recargables. Las baterías recargables SOLO se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

15. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

15.1 Lea estas instrucciones: debe leer todas las instrucciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el producto.

15.2 Guarde estas instrucciones. Debe conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para una futura consulta.

15.3 Observe todas las advertencias: se deben respetar todas las advertencias sobre el producto y las instrucciones de funcionamiento.

15.4 Siga todas las instrucciones: se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

15.5 Agua y humedad: NO utilice este dispositivo junto al agua. Por ejemplo, junto a una bañera, lavabo, fregadero, barreño, o en un entorno húmedo o junto a una piscina o lugares similares. EVITE que las unidades sufran golpes y que se derramen líquidos sobre las aberturas de la unidad o el detector de movimientos.

15.6 Limpieza: desconecte todas las unidades antes de su limpieza. NO sumerja en agua ninguna pieza de las unidades del bebé o para los padres. Limpie solo con un paño seco.

15.7 Ventilación: NO bloquee las aberturas de ventilación. Asegure una ventilación correcta cuando las unidades estén en funcionamiento. NO cubra las unidades del bebé o para los padres con ningún objeto, como por ejemplo una manta. NO las guarde en cajones o lugares donde se pudiera amortiguar el sonido o el flujo normal de aire se pudiera ver interrumpido

15.8 Fuentes de calor: NO las coloque junto a fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas, televisores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que emitan calor. El calor puede dañar la carcasa o las piezas eléctricas.

15.9 Protección de los cables de alimentación: proteja el cable del detector de movimientos y el cable de alimentación del adaptador para evitar que los pisen o los aprisionen con muebles u otros objetos. Los cables eléctricos deben colocarse de modo que no haya riesgos de pisarlos ni aplastarlos o apretarlos con algún objeto; preste especial atención a los cables y enchufes, a los receptáculos y a los puntos por donde salen del producto.

15.10 Accesorios. Solo use dispositivos/ accesorios especificados por el fabricante. NO coloque este producto sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestables. El producto podría caerse y dañarse, así como causar lesiones graves a niños o adultos. Use ÚNICAMENTE con un carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cada vez que se arme el producto deben seguirse las instrucciones del fabricante.

15.11 Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos.

15.12 Mantenimiento: NO intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las tapas (excepto la tapas del compartimiento de batería) puede exponerse a voltajes peligrosos u otros peligros.

15.13 Piezas de repuesto: Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que las piezas de repuesto especificadas por el fabricante tengan las mismas características que las piezas originales. Los repuestos no autorizados pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

15.14 Uso: El propósito de este monitor para bebés es servir como una ayuda. NO es un sustituto de la supervisión responsable y correcta de un adulto y no debe ser utilizado como tal. Use este aparato SOLO para los fines descritos en este manual.

15.15 Fuentes de alimentación: use este producto solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la placa de identificación del adaptador. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación eléctrica de su hogar, consulte a su distribuidor o a la empresa de energía eléctrica local.


15.16 Sobrecarga. NO sobrecargue los tomacorrientes, cables de extensión o receptáculos integrales, ya que esto puede ocasionar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

15.17 Entrada de objetos y líquidos: NUNCA introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o causar un cortocircuito que podría ocasionar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica. NUNCA derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.

15.18 Antena: la antena utilizada para este transmisor debe instalarse a una distancia de al menos 20 cm (7,9") de todas las personas y no debe colocarse ni operar conjuntamente con otra antena o transmisor.

15.19 Líneas de energía eléctrica: un sistema de antena exterior NO debería estar situado en las proximidades de líneas eléctricas aéreas o de otro circuito de luz o potencia, o donde pueda caer sobre dichas líneas o circuitos ya que el contacto con ellos puede ser letal.

15.20 ADVERTENCIA Peligro de estrangulación — Ha habido casos de

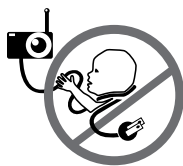

niños que se han **ESTRANGULADO**. Mantenga los cables de los adaptadores fuera del alcance de los niños (a una distancia mínima de 0.9 m [3 pies]). NUNCA use el detector de movimientos sin

la cobertura de protección del cable. Verifique la cobertura de protección antes de cada uso. Si la cobertura de protección se encuentra dañada o rota, suspenda inmediatamente el uso del detector de movimientos.

15.21 Interferencias: Este monitor utiliza ondas públicas para transmitir señales. La unidad para los padres puede detectar las señales o interferencias de otros monitores de bebés cercanos. La unidad para los padres hasta puede captar señales o interferencias de otros monitores de bebés en su zona. Para proteger su intimidad, asegúrese de que ambas unidades están **APAGADAS** cuando no estén en uso. Si sufre interferencias, cambie el canal de ambas unidades.

15.22 Fuente de vibración: cuando el monitor está en uso, NO utilice accesorios de cuna como móviles o de otro tipo que puedan producir vibraciones. Otras fuentes de vibración pueden incluir ventiladores, lavadoras, música alta, etc. Estas fuentes de vibración pueden interferir con el desempeño de su monitor Angelcare® y la alarma no sonará si continúa detectando cualquier otro movimiento que no sea el de su bebé. Antes de utilizar el monitor asegúrese de que se hayan eliminado todas las fuentes de vibración.

Pueden producirse falsas alarmas por varias razones. La razón más común es que la unidad del bebé no se haya apagado (posición OFF) después de haber retirado al bebé de la cuna. Otra razón es que el detector de movimientos no se haya puesto correctamente debajo del colchón.

Asegúrese de que el detector de movimientos esté en una superficie plana y firme con la cara impresa hacia arriba. También puede ser necesario ajustar el nivel de sensibilidad. Consulte el Paso 5.3. Siempre que suene una alarma, asegúrese de ver de inmediato a su bebé.

15.23 Detector de movimientos: si la cuna tiene una base de resortes o listones, coloque una tabla de fibra de alta densidad entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 33 x 33 cm (13" x 13") y tenga 6 mm (1/4") de espesor. Solo use el monitor Angelcare® en un ambiente fijo para dormir, como una cuna, donde el detector de movimientos pueda colocarse en una superficie completamente plana y firme.

16. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL USO DE BATERÍAS

16.1 Utilice SOLO el tipo y el tamaño de baterías especificados en el manual del propietario. Si las baterías se reemplazan por un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.

16.2 SOLO utilice baterías AAA recargables o los adaptadores de CA proporcionados para la unidad para los padres. En la unidad para los padres se deben utilizar solamente baterías recargables. NO utilice baterías alcalinas porque dañarían seriamente a la unidad.

16.3 Cargue las baterías durante 15 horas antes de usar la unidad por primera vez. Asegúrese de que el monitor esté apagado (OFF) durante este período. Utilice SOLO los adaptadores de CA incluidos.

16.4 NO use estos adaptadores con otros equipos.

16.5 Al desenchufar el adaptador de CA de la unidad del bebé, asegúrese de que esté APAGADO (OFF). De lo contrario, la unidad volverá al modo de batería si las baterías están instaladas.

16.6 NO utilice baterías recargables en la unidad del bebé. Use SOLO baterías alcalinas.

16.7 NO arroje las baterías al fuego. Pueden explotar. Para obtener posibles instrucciones especiales sobre cómo eliminar las baterías, consulte las regulaciones locales.

16.8 Tenga cuidado al manipular las baterías para no producir un cortocircuito con materiales conductores como anillos, pulseras y llaves. Se deben evitar la sobrecarga, el cortocircuito, la carga a la inversa, la mutilación o la incineración de baterías para prevenir una o más de las siguientes situaciones: liberación de materiales tóxicos, liberación de hidrógeno o gas de oxígeno, aumento de la temperatura de la superficie.

16.9 NO intente recargar las baterías suministradas o identificadas para su uso con este producto que no estén destinadas a ser cargadas. Las baterías pueden perder electrolitos corrosivos o explotar.

16.10 NO intente rejuvenecer las baterías suministradas o identificadas para su uso con este producto, calentándolas. Puede producirse una liberación repentina de electrolitos de la batería y provocar quemaduras o irritación en los ojos o la piel.

16.11 Cuando sea necesario, las baterías deben ser reemplazadas por unas nuevas e idénticas o equivalentes (voltios y tamaño). Si la batería por cambiar está conectada con otras baterías en serie, reemplace las otras baterías al mismo tiempo. NO mezcle baterías nuevas y antiguas.

16.12 Debe evitarse la instalación de las baterías en el producto final con polaridad inversa. La instalación reversa de las baterías puede causar que se carguen, provocando así una fuga o una explosión.

16.13 Si guarda el producto durante más de 30 días retire las baterías, ya que estas podrían tener fugas y dañar el producto.

16.14 Elimine las baterías agotadas tan pronto como sea posible ya que estas son más propensas a filtrarse al producto. Si la batería se ha filtrado o está dañada, se debe reemplazar inmediatamente usando guantes protectores.

16.15 NO guarde este producto o las baterías proporcionadas o identificadas para su uso en áreas de alta temperatura.

ADVERTENCIA

(Solo para Norteamérica)

17.1 Las modificaciones no consentidas por el fabricante pueden anular la autorización de los usuarios para utilizar este dispositivo.

17.2 NOTA: Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con la Parte 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la licencia de Industry Canada excepto la(s) norma(s) RSS. El propósito de estos límites es brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en el hogar. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radioeléctrica y, si no se lo instala y emplea según las instrucciones pertinentes, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

17.3 Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión -lo que puede determinarse al apagar (posición OFF) y encender el equipo (posición ON)- se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

17.4 Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC y la licencia de Industry Canada excepto la(s) norma(s) RSS. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

E
S

REGULACIONES DE FCC E IC

Declaración sobre exposición a la radiación RF

La unidad del bebé cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) establecidos por la FCC para ambientes no controlados. **Precaución:** Para cumplir con las directrices de exposición a la radiofrecuencia definidas por la FCC, instale la unidad del bebé a una distancia de al menos 20 cm (7,9") de TODAS las personas. El transmisor de este dispositivo no debe colocarse ni accionarse juntamente con ningún otro transmisor o antena.

Industry Canada

Este producto cumple con las especificaciones técnicas pertinentes de Industry Canada (IC). CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

MONITOR DE MOVIMIENTOS Y SONIDOS

Modelo AC403


INCLUYE:




1 unidad de los padres (AC403) o 2 unidades de los padres (AC403-2PU)




Unidad del bebé

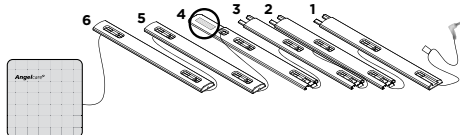

Detector de movimientos con protección de cables preinstalada

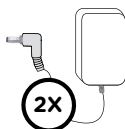

2 adaptadores de CA (AC403) o 3 adaptadores de CA (AC403-2PU)

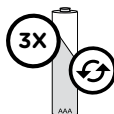

3 baterías AAA recargables (AC403) o 6 baterías AAA recargables (AC403-2PU) para la unidad para los padres

USTED DEBE PREPARAR LO SIGUIENTE:

Una tabla de fibra de alta densidad (no se incluye).

Espesor: **6 mm (1/4")**

Dimensiones mínimas

33 cm (13") x 33 cm (13")

Dimensiones máximas: el mismo tamaño que el colchón tabla de fibra de alta densidad



Tabla


IMPORTANTE

La tabla de fibra de alta densidad debe ser más grande que el área de superficie del detector o los detectores de movimientos.

NECESITARÁ LO SIGUIENTE (NO INCLUIDO):



4 baterías AAA alcalinas para la unidad del bebé

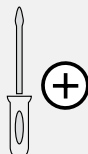


Destornillador Philips miniatura

HABITACIÓN DEL BEBÉ:

IMPORTANTE

Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo y lejos de corrientes de aire. Instale la unidad del bebé sobre una superficie plana y estable en dirección a la cuna a una distancia de al menos **0.9 metro (3 pies)**. Asegúrate de enchufar el adaptador al enchufe mas cercano al equipo para facilitar su accesibilidad.

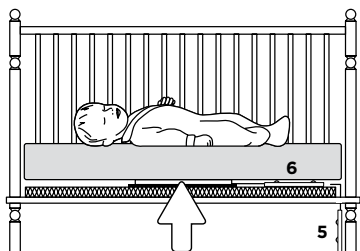


Detector de movimientos




IMPORTANTE

Mantenga una distancia mínima de **0.9 m (3 pi.)**

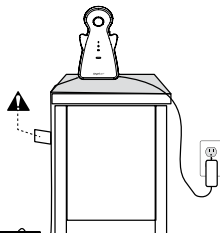


PASO 1 - CARGA DE LA UNIDAD DE LOS PADRES (15 HORAS)

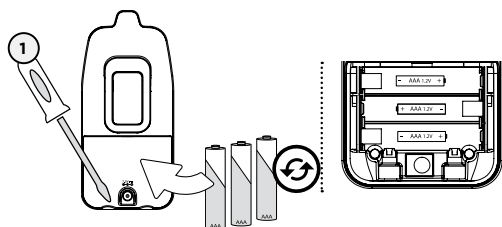

IMPORTANTE

Nunca utilice baterías alcalinas comunes en la unidad para los padres; podrían explotar.

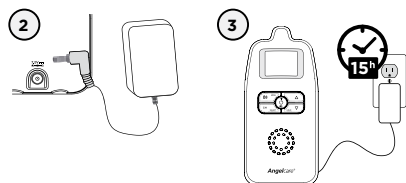

- 1) Retire la tapa del compartimento de la batería e inserte baterías recargables (incluidas).
- 2) Conecte el adaptador de CA a la unidad para los padres y al tomacorriente.
- 3) Cargue la unidad durante **15 horas seguidas (antes de utilizarla por primera vez)**.

NOTA:

Para optimizar el rendimiento de la batería, consulte las directrices para baterías que figuran en la sección resolución de problemas.

1.1 - BATERÍAS

CÓMO REVISAR LAS BATERÍAS:

Desenchufe los adaptadores de CA de ambas unidades.

- Si el indicador de encendido de la unidad del bebé no se ilumina o si el indicador para batería baja se ilumina, cambie las baterías.
- Si la pantalla de unidad para los padres no se ilumina o se apaga, vuelva a cargar las baterías.



Indicador de encendido de la unidad del bebé



Indicador de batería baja de la unidad del bebé





ALARMA DE BATERÍA DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES


- La alarma se activa cuando las baterías deben recargarse.
- La unidad para los padres emitirá un pitido cada 15 segundos.
- El ícono de alarma de la batería aparecerá en la pantalla.

CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES:


Conecte el adaptador de CA a la unidad para los padres y a un tomacorriente que funcione. La unidad para los padres puede funcionar con las baterías a media capacidad, pero se recomienda cargarlas completamente antes de desconectar la unidad del adaptador de CA y del tomacorriente de alimentación para conseguir un funcionamiento óptimo.

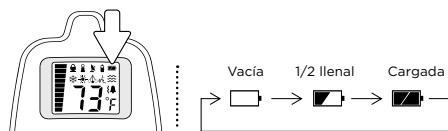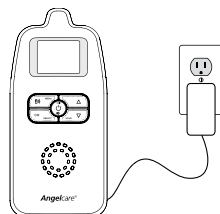

UNIDAD PARA LOS PADRES:

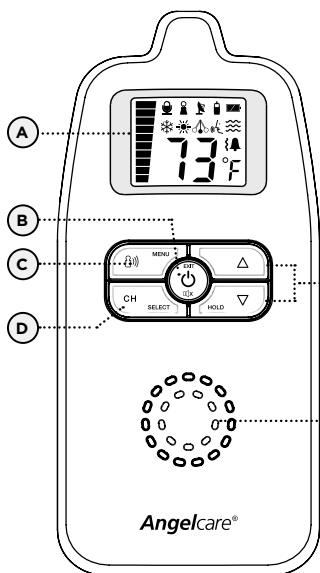


Vista delantera

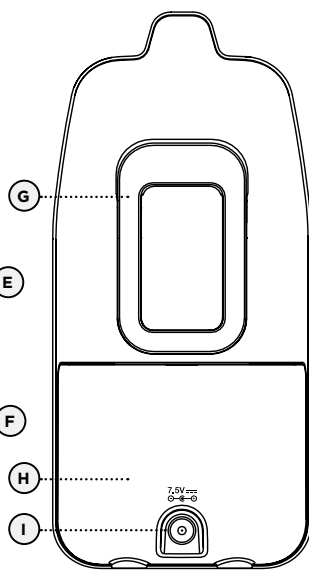

Vista posterior

- A) Pantalla LCD
- B) ENCENDIDO/APAGADO
- C) Botón MENU
- D) Botón de canal
- E) Subir/bajar volumen del sonido y HOLD
- F) Altavoz
- G) Gancho de cinturón
- H) Tapa de la batería
- I) Salida del adaptador de CA

PASO 2 - INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS

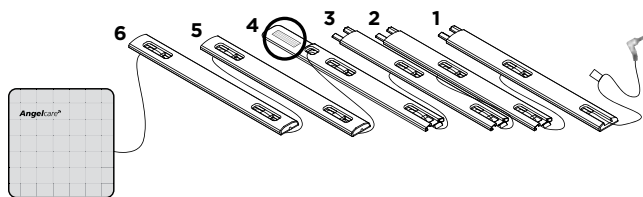

Detector de movimientos con protección de cables preinstalada

Protección de cables

1, 2, 3, 4:

Posición en el suelo

Protección de cables 4:

Contiene cinta adhesiva de doble cara para instalarlo tras la pata de la cuna

Protección de cables 5:

Para ponerla verticalmente entre soporte del colchón y el suelo

Protección de cables 6:

Ponerla por debajo del colchón

ES

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN.


Algunos niños se han ESTRANGULADO con los cables.

- Mantenga los cables de los adaptadores fuera del alcance de los niños (a una distancia mínima de 0.9 m [3 pies]).
- Debido al grave riesgo de estrangulación para los bebés y niños pequeños, los padres y los cuidadores nunca deben colocar la unidad del bebé a una distancia menor de 0.9 metro (3 pies) de la cuna.
- **NUNCA** utilice el detector de movimientos sin tapa protectora del cable. Revise las tapas protectoras de los cables antes de cada uso y verifique que está sujetado de modo seguro por debajo de una de las patas de la cuna. Discutinie el uso del detector de movimientos si la tapa está dañada o rota.
- **NUNCA** utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice **SOLAMENTE** los adaptadores de CA suministrados. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.





2.1 - SELECCIONE EL SITIO PARA LA UNIDAD DE BEBÉ

Seleccione una ubicación para la unidad del bebé, que debe estar a al menos **0.9 metro (3 pies)** de distancia de la cuna.

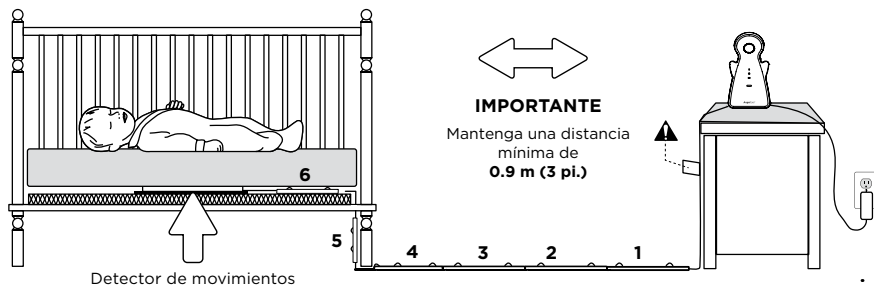


2.2 SELECCIONE LA PATA DE LA CUNA QUE QUIERE USAR PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE CABLES

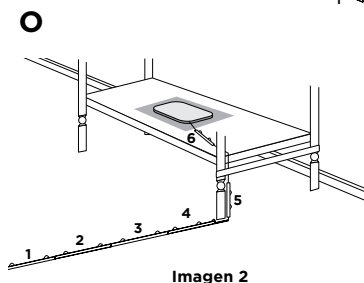
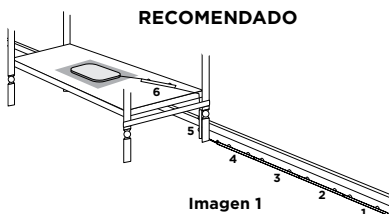


- 1) Utilice la pata de la cuna al lado de la pared y más cerca a la unidad de bebé (**imagen 1**). Si la unidad de bebé está en el otro lado de la habitación, utilice la pata más cerca a la unidad de bebé para colocar el cable protegido (**imagen 2**). Es preferible que el cable protegido esté colocado a lo largo de una pared.






2.3 - INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS EN EL SOPORTE DEL COLCHÓN

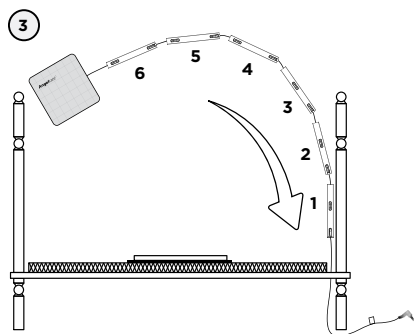

- 1) Retire el colchón de la cuna.
- 2) Coloque el detector de movimientos (con la cara impresa hacia arriba) sobre la **tabla de fibra de alta densidad**, en el medio de la cuna.
- 3) Lleve la pieza de conexión, la etiqueta de advertencia y las 5 primeras piezas de protección hacia abajo, a lo largo de la parte trasera de la pata de la cuna, **entre el soporte del colchón y el borde interior de la cuna**.

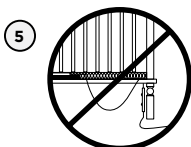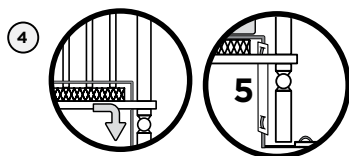

- 4) Lleve las 4 primeras piezas de protección de cable hacia el suelo y mantenga la quinta en posición vertical a lo largo de la parte trasera de la pata de la cuna (**entre el soporte del colchón y el borde interior de la cuna**).
- 5) Tire para entesar el cable y asegúrese que no haya partes flojas.

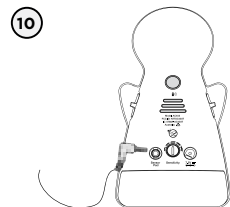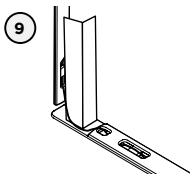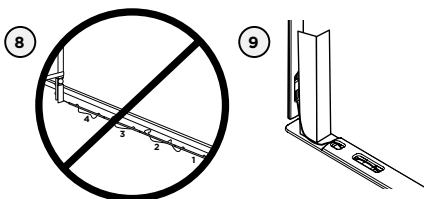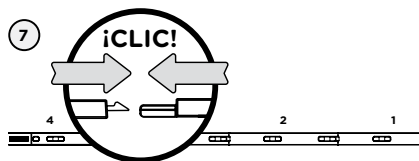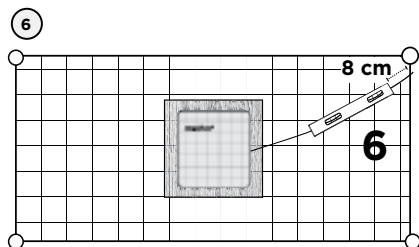

- 6) Coloque la sexta protección a una distancia de unos 8 cm (3 pulgadas) del borde del soporte del colchón.
- 7) Junte las protecciones de cable restantes que estarán colocadas en el suelo.
- 8) Tire para entesar el cable y asegúrese que no haya partes flojas.
- 9) Remueva la protección de la cinta adhesiva de doble cara en la cuarta protección para el cable y colóquelo de forma segura por debajo de la pata de la cuna.
- 10) Instale la unidad del bebé sobre una superficie plana y estable en dirección a la cuna a una distancia de al menos 0.9 m (3 pi.) y conecte el detector de movimientos con la unidad de bebé.
- 11) Compruebe que el detector de movimientos no se ha movido de su posición inicial.
- 12) Vuelva a colocar el colchón en la cuna.

El detector de movimientos funciona con cualquier tamaño y tipo de colchón excepto los colchones con espuma viscoelástica y colchones con bastidores huecos.

La tabla de fibra de alta densidad mantiene una presión constante sobre el detector de movimientos, lo que permite detectar los movimientos del bebé aun cuando el bebé está en el borde de la cuna.




⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN


- Tire para entesar el cable del detector de movimientos.
- Cuando el bebé crece y hay que bajar el soporte del colchón, deslice la protección vertical del cable (5) hacia arriba para que siga quedando en el centro entre el soporte del colchón y el suelo. Lleve el cable del detector de movimientos a través de la protección en el suelo y tire para que no haya parte flojas.

- El detector de movimientos no está diseñado para usarse con adultos, niños o lactantes de más de 24 meses.
- Discontinúe el uso del detector de movimientos si el niño tiene más de 24 meses. Retire el detector de movimientos de la cuna y guárdelo para usarlo en el futuro.
- ANTES DE USAR EL MONITOR POR PRIMERA VEZ: Para probar que el monitor esté preparado para ser utilizado, consulte el manual de instrucciones acerca del procedimiento adecuado

PASO 3 - INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DEL BEBÉ

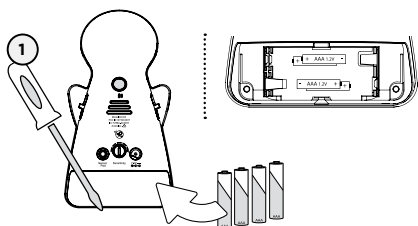


- 1) Retire la tapa del compartimiento de la batería e inserte 4 baterías AAA alcalinas (no se incluyen).
- 2) Coloque la unidad del bebé a una distancia **mínima de 0.9 m (3 pies)** de la cuna.
- 3) Conecte el adaptador de CA a la unidad del bebé y al tomacorriente.

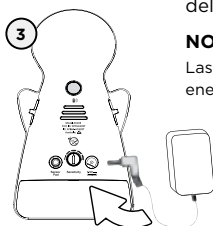


NOTA:

Las baterías conservan la alimentación de energía en caso de corte de luz.

UNIDAD DEL BEBÉ:

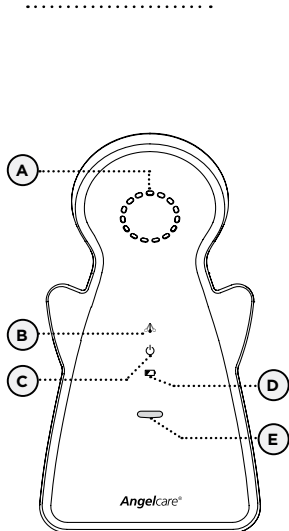


Vista delantera

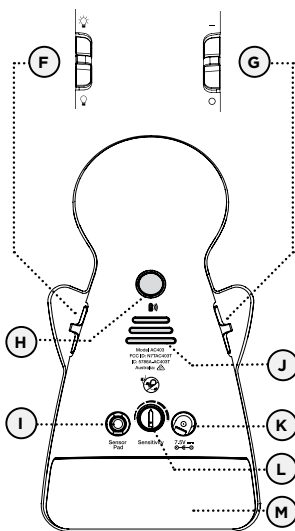

Vista posterior

- A) Micrófono
- B) Indicador TIC de movimiento (parpadeo)
- C) Indicador de encendido
- D) Indicador de batería baja
- E) Altavoz
- F) Conmutador de lamparilla de noche Night Light Switch ON/OFF
- G) Encendido/apagado
- H) Botón de localizador
- I) Salida del detector de movimientos
- J) Ranuras de ventilación
- K) Salida del adaptador de CA
- L) Selector de sensibilidad del detector de movimientos
- M) Tapa de la batería

PASO 4 - ENCENDIDO DEL MONITOR

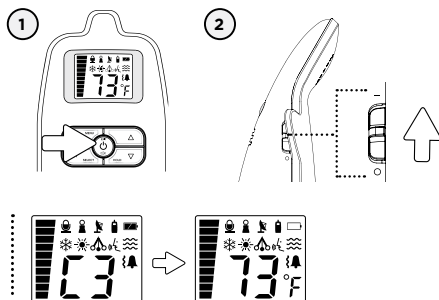

Cuando la unidad para los padres está encendida y la unidad del bebé está apagada:



- No aparece ningún ícono de canal en la pantalla, aunque el ícono de la unidad del bebé parpadee.
- Pasado 1 minuto la unidad para los padres empezará a emitir pitidos. La unidad para los padres seguirá sonando durante 5 segundos, y después se apagará sola.

- 1) Pulse el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** de la unidad para los padres durante 2 segundos.
- 2) Coloque el botón de **encendido** de la unidad del bebé en la posición **ON**.

NOTA:

La pantalla de la unidad para los padres mostrará el canal de transmisión (C1 a C8) y, después de 5 segundos, los íconos de funcionamiento y temperatura de la habitación.


El proceso de conexión debe realizarse en 30 segundos. Si esta secuencia no se completa en 30 segundos, necesitará apagar las unidades y volver a empezar.



Si se pierde la conexión entre las 2 unidades (consulte resolución de problemas):

- El ícono de fuera de alcance (si está activado) parpadeará en pantalla, y la unidad para los padres emitirá pitidos.

SELECCIÓN DE CANAL

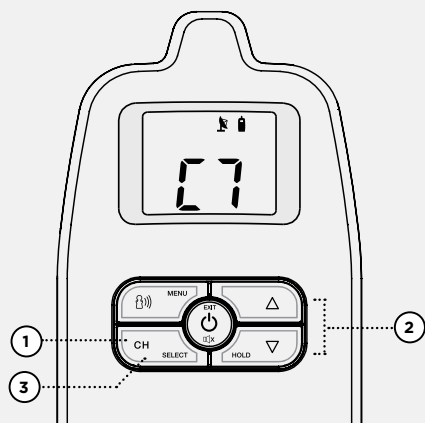

PARA SELECCIONAR EL CANAL:

- 1) Mantenga pulsado el botón de selección para entrar en el modo de canal.
- 2) Pulse la flecha hacia ARRIBA o ABAJO para cambiar el canal por el que transmite su monitor. (C1 a C8)
- 3) Pulse el botón de selección de nuevo para confirmar el canal elegido.

NOTA :

Si la transmisión no es clara u oye interferencias, deberá cambiar de canal.

ÍCONOS IMPORTANTES



TRANSMISIÓN DE SONIDO (VOZ)



Unidad del bebé:

Aparece cuando se están definiendo las opciones de la unidad del bebé.



Fuera de alcance:

Indica que se ha perdido la conexión entre la unidad para los padres y la del bebé.



Unidad para los padres:

Aparece cuando se están definiendo las opciones de la unidad para los padres.



Indicador de temperatura:

Indica la temperatura de la habitación.



Temperatura baja:

Aparece cuando se activa la alerta de temperatura baja.



Temperatura alta:

Aparece cuando se activa la alerta de temperatura alta.



Indicador de canal:

Indica el canal seleccionado.

Íconos de modo de alarma:

Indica el modo de alarma seleccionado.



Alarma sonora



Alarma sonora y vibración



Solo vibración



Volumen/nivel de sensibilidad de voz:

Indica el volumen y el nivel de sensibilidad de voz.

Íconos de modo de detección:

Indica el modo de detección seleccionado:



Solo movimiento



Solo sonido



TIC, sonido y movimiento



Sonido y movimiento



TIC y movimiento

Ícono de nivel de batería:

Indica el nivel de batería



Vacía



1/2 llena



Cargada



Cargando

PASO 5 - PRUEBA Y CONOCIMIENTO DEL MONITOR

El monitor Angelcare® puede usarse con los ajustes predeterminados de fábrica o bien personalizarse según sus preferencias.



Los cambios o ajustes que realice en el menú principal y los submenús no se activarán hasta que los confirme pulsando el botón **SELECT**, seguido del botón **EXIT**.

IMPORTANTE

En los modos Menú o Submenú, se desactiva transitoriamente la transmisión de sonido entre la unidad de los padres y la unidad del bebé.

5.1 - ACCESO AL MENÚ Y CAMBIO DE AJUSTES

Para acceder a los ajustes del menú, pulse el botón MENU de la unidad para los padres. Las funciones del menú se muestran en bucle. Cada vez que pulse el botón MENÚ brevemente pasará a la siguiente función del MENÚ. Las funciones del menú aparecen en el siguiente orden:

PRESIONANDO UNA (1) VEZ:	TIC, movimiento y sonidoPASO 5.2 y PASO 5.3
PRESIONANDO DOS (2) VECES:	Fuera de alcancePASO 5.4
PRESIONANDO TRES (3) VECES:	Transmisión de sonidoPASO 5.5
PRESIONANDO CINCO (5) VECES:	AlarmaPASO 5.7
PRESIONANDO SEIS (6) VECES:	Temperatura.....PASO 5.9

NOTA:

Si continúa pulsando el botón MENU seguirá moviéndose en bucle. Cuando haya seleccionado los ajustes que desee deberá pulsar SELECT y después EXIT, o sus cambios no se guardarán.

5.2 - DETECTOR DE MOVIMIENTOS

FUNCIONES DEL SENSOR DE MOVIMIENTOS:



TIC: Le permite detectar los movimientos de su bebé y oír un sonido TIC con cada movimiento. (Esta función SOLO puede activarse junto con la función de movimiento.)



Solo sonido: Le permite detectar ÚNICAMENTE los sonidos del bebé. La detección de movimiento se desactivará.



Solo movimiento:


Allows you to detect the baby's movements with the TIC sound as an option. Le permite detectar los movimientos del bebé con la opción del sonido TIC.

IMPORTANTE

Quando se encuentre en modo de MENÚ o SUBMENÚ, **NO** se emitirá ningún **sonido, alarma o vibración** desde la unidad para los padres o del bebé, aunque se activen pulsando el modo de MENÚ o SUBMENÚ.

5.3 - CAMBIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DE SONIDO Y MOVIMIENTO

PARA DEFINIR EL MODO DE DETECCIÓN:

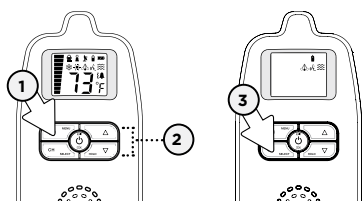


- Solo movimiento
- Solo sonido
- TIC, sonido y movimiento
- Sonido y movimiento
- TIC y movimiento

- 1) Pulse el botón **MENU** una vez y aparecerán los iconos parpadeando.
- 2) Use las flechas **ARRIBA** y **ABAJO** para seleccionar el modo de detección que desee.
- 3) Pulse el botón **SELECT** para confirmar su selección.
- 4) Pulse **MENU** para ver la siguiente opción o **EXIT** si ha terminado de programar.

Si pulsa el botón **MENU** demasiado tiempo, la unidad cambiará al modo de conexión y el indicador de fuera de alcance empezará a parpadear. Si esto ocurre, espere 20 segundos y pulse **MENU** para volver a empezar.

PRUEBA DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS:

DEBE ACTIVARSE EL MODO MOVIMIENTO O TIC:

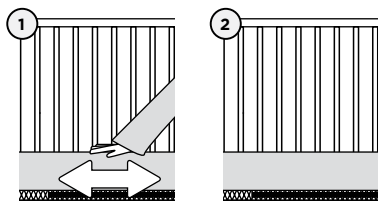

- 1) Mueva la mano ligeramente en el colchón.



El icono de péndulo aparecerá en la barra de indicadores de la unidad para los padres. Se moverá a medida que mueva la mano, y activará un sonido TIC.

- 2) Quite la mano del colchón. Después de 15 segundos oírás el sonido de prealarma de TIC y 5 segundos más tarde se activará la alarma de movimiento.
- 3) Repita la operación moviendo la mano suavemente por las cuatro esquinas del colchón. Asegúrese de que el indicador de movimiento de la unidad del bebé sigue parpadeando.


ALARMA DE MOVIMIENTO

- Si NO se detecta ningún movimiento tras 15 segundos, la unidad del bebé emitirá un único sonido de prealarma TIC.
- Si después de 5 segundos sigue sin detectarse NINGÚN movimiento, los altavoces de la unidad para los padres y de la unidad del bebé emitirán un fuerte sonido de alarma.
- El icono de la unidad del bebé parpadea en la unidad para los padres.
- La luz verde de la unidad del bebé se apagará, indicando que NO se detecta movimiento.


SI LA ALARMA NO SUENA

- Evite tocar la cuna mientras el detector de movimientos esté funcionando.
- Coloque la cuna contra una pared de carga.
- Ajuste el nivel de sensibilidad del detector de movimientos.


PARA DETENER LA ALARMA

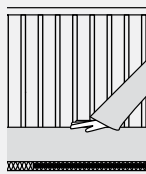


Vuelva a colocar la mano en el colchón.

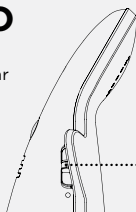

Apague la unidad del bebé.

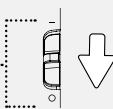


Pulse cualquier tecla para poner en espera (consulte la sección 5.8)

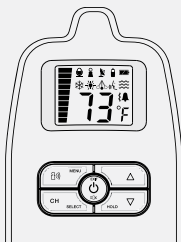

ES

PARA AJUSTAR EL NIVEL DE SENSIBILIDAD DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS:

Puede ajustar el selector de sensibilidad de la unidad del bebé para determinar que el detector de movimientos sea más o menos sensible. Este selector de sensibilidad se encuentra en la parte posterior de la unidad del bebé.

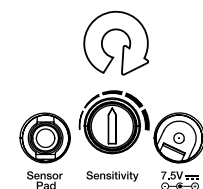

NOTA:

Si se producen falsas alarmas, ajuste el nivel de sensibilidad.

Para conseguir resultados óptimos, comience colocando el selector de sensibilidad en la 3ª barra, ajuste la sensibilidad en aumentos o disminuciones de media barra, según necesite.

IMPORTANTE

- El detector de movimientos no está diseñado para usarse con adultos, niños o lactantes de más de 24 meses.
- Cuando haya terminado de usar el detector de movimientos, retírelo de la cuna del bebé y guárdelo en otro lugar.


5.4 - CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN FUERA DE ALCANCE

Su monitor cuenta con una función de fuera de alcance que le avisa cuando falla la comunicación entre las dos unidades. Este tipo de situaciones se pueden producir cuando las unidades están muy alejadas o existen obstáculos físicos.

ALCANCE:

Campo abierto (zona abierta sin obstáculos): hasta 250 metros (820 pies).

PARA ACTIVAR ESTA FUNCIÓN:

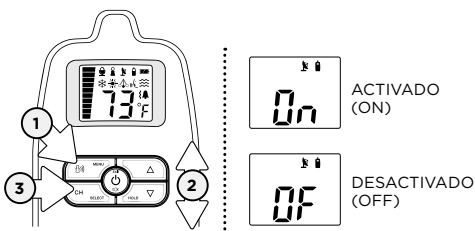

- 1) Pulse 2 veces el botón **MENU**.

El indicador de fuera de alcance parpadeará.

- 2) Con las flechas **ARRIBA** y **ABAJO**, active o desactive la función.

- 3) Pulse el botón **SELECT** y, a continuación, **EXIT** para confirmar su selección.

ALARMA DE FUERA DE ALCANCE:


- La alarma se activa cuando falla la comunicación entre las dos unidades.
- La unidad para los padres emitirá un pitido doble cada 8 segundos.
- El ícono de fuera de alcance parpadeará en la pantalla.

El ícono de fuera de alcance también parpadeará cuando cambie el canal o la unidad vuelva a conectarse.


IMPORTANTE

Si la función de fuera de alcance está activada y **APAGA** la unidad del bebé, la alarma de fuera de alcance sonará o vibrará (según el modo de alarma seleccionado). Vuelva a **ENCENDER** la unidad del bebé para reactivar la conexión.

PARA DETENER LA ALARMA DE FUERA DE ALCANCE:

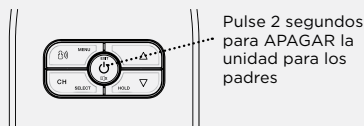

Pulse 2 segundos para **APAGAR** la unidad para los padres

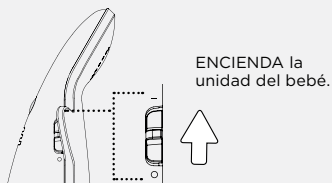

ENCIENDA la unidad del bebé.

5.5 - TRANSMISIÓN DE SONIDO (VOX)

Su monitor cuenta con la opción **“VOX”** (activación por voz: solo detecta sonido según el nivel de sensibilidad) o transmisión **“continua”**.

PARA PROBAR EL SONIDO:

Pídale a alguien que hable hacia la unidad del bebé o coloque la unidad cerca de una radio para asegurarse de que recibe sonido.


IMPORTANT

Para evitar el acople (silbido), mantenga ambas unidades a una distancia mínima de 3 metros (10 pies).

SI NO ESCUCHA NINGÚN SONIDO:

- Verifique que ambas unidades estén **ENCENDIDAS**.
- Verifique que ambas unidades estén enchufadas a tomacorrientes que funcionen correctamente.
- Revise las baterías de ambas unidades (reemplácelas o recárguelas según se requiera en cada unidad).
- Acerque la unidad para los padres a la unidad del bebé.

PARA ACTIVAR EL MODO VOX:

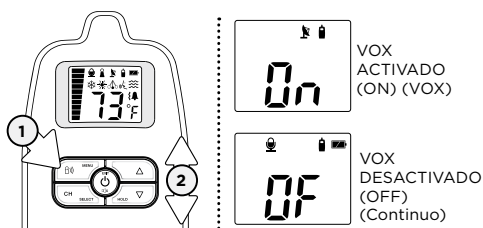

- 1) Pulse 3 veces el botón **Menu**.



El ícono de VOX aparecerá.

- 2) Con las flechas, **ACTIVE** o **DESACTIVE** la función.


NOTA:

Si selecciona OFF, la unidad entra en modo VOX.

- 3) Pulse el botón **Select** para confirmar su selección.

PARA AJUSTAR LA SENSIBILIDAD DEL SONIDO (VOX):

La sensibilidad del micrófono es ajustable y tiene 4 niveles (el de mayor sensibilidad es el 4). Esto significa que el sonido solo se transmitirá según el nivel que establezca.

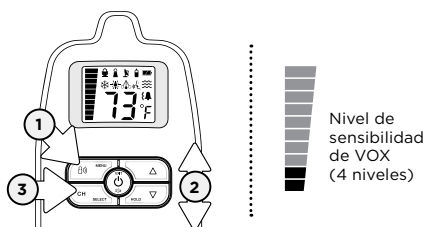


- 1) Pulse **4 veces** el botón **MENU**.



Aparecerá el ícono de nivel de sensibilidad.

- 2) Con las teclas de flecha, seleccione el nivel de sensibilidad de micrófono deseado.
- 3) Pulse el botón **SELECT** para confirmar su selección.

AJUSTAR NIVEL DE SONIDO

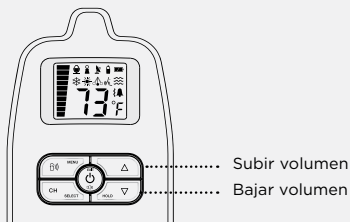

SELECCIONAR MODO DE SILENCIO TEMPORAL



5.6 - SILENCIO TEMPORAL


Le permite poner el monitor en modo **SILENCIO** temporalmente.

PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN SILENCIO:

Pulse el botón de sonido/apagado (**SOUND/OFF**).

PARA DESACTIVAR LA FUNCIÓN SILENCIO:

Pulse el botón de sonido/apagado (**SOUND/OFF**) de nuevo para activar el sonido.

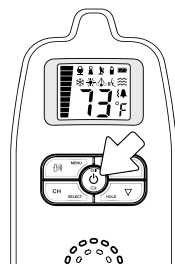

Después de 2 minutos, el sonido se volverá a activar automáticamente.

Si pulsa el botón sonido/apagado (**SOUND/OFF**) durante demasiado tiempo, la unidad para los padres se apagará.





NOTA:

El ícono de sonido parpadeará en la unidad para los padres y la función de SILENCIO temporal se activará.

5.7 - CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Le permite seleccionar el modo de alarma que prefiera.

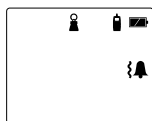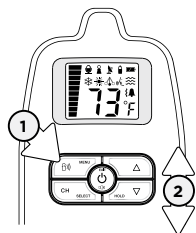

1) Pulse 5 veces el botón **MENU**.

El indicador de la unidad del bebé parpadeará.

2) Con las flechas, seleccione el modo de alarma deseado.

NOTA:

El modo de vibración no está disponible en algunos países.

La alarma con sonido sustituirá el modo de vibración cuando la unidad para los padres se esté cargando.



Alarma sonora



Alarma sonora y vibración



Solo vibración (la alarma no sonará en la unidad para los padres, sino en la unidad del bebé).

IMPORTANTE

La opción de vibración funcionará cuando las siguientes funciones de alarma se activen:



- Fuera de alcance
- Alerta de temperatura
- Falta de movimiento detectada durante 20 segundos.

IMPORTANTE

Cuando se encuentre en modo de MENÚ o SUBMENÚ, **NO** se emitirá ningún **sonido, alarma o vibración** desde la unidad para los padres o del bebé, aunque se activen pulsando el modo de MENÚ o SUBMENÚ.

5.8 - PAUSA

Le permite poner el monitor Angelcare en PAUSA.

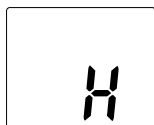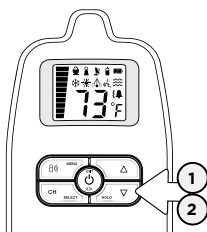

- 1) Mantenga pulsada la flecha de bajar volumen durante 2 segundos.

El ícono de pausa aparecerá en la pantalla. La unidad para los padres emitirá un pitido doble cada minuto para recordarle que su monitor está en **PAUSA**.

- 2) Para desactivar esta función, mantenga pulsada la flecha de **bajar volumen** durante 2 segundos.

IMPORTANTE


Cuando el monitor está en **PAUSA**, se desactivan la función de detección de movimiento y la alarma de movimiento.

IMPORTANTE

Cuando el monitor está en modo **PAUSA**, la alarma de movimiento se apagará y el sonido no se transmitirá. Cuando el monitor está en modo Solo sonido, la función **PAUSA** no se puede activar.

5.9 - TEMPERATURA

PARA ACTIVAR LA ALARMA DE TEMPERATURA:

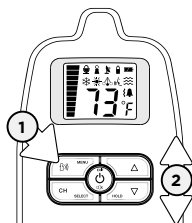


- 1) Pulse 6 veces el botón **MENU**.

El indicador de temperatura (baja y alta) aparecerá.

- 2) Con las flechas, **ACTIVE** o **DEACTIVE** la función.
- 3) Pulse el botón **SELECT** para confirmar su selección.


PARA CONFIGURAR EL RANGO DE TEMPERATURA:

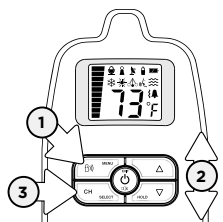

- 1) Pulse 6 veces el botón **MENU**.

El indicador de temperatura (baja y alta) aparecerá.

- 2) Con las flechas, **ACTIVE** la función.
- 3) Pulse el botón **SELECT** para confirmar su selección.

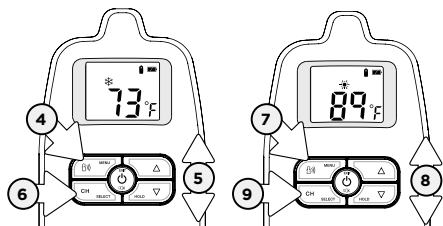

ALARMA DE TEMPERATURA

- La alarma se activa cuando la temperatura alcanza la temperatura establecida como máximo o mínimo.
- La unidad para los padres emitirá 3 pitidos consecutivos, cada 5 segundos, si la temperatura alcanza niveles fuera del intervalo seleccionado. El ícono correspondiente parpadeará en la pantalla de la unidad para los padres para alertarle.

- 4) Pulse el botón **MENU** y aparecerá el ícono de copo de nieve (ícono de baja temperatura).
- 5) Pulse las flechas para establecer la alarma de **BAJA** temperatura (de 5 a 19 °C/de 41 a 67 °F) 6) Pulse el botón **SELECT** para confirmar su selección.
- 6) Pulse el botón **SELECT** para confirmar su selección.
- 7) Pulse el botón **MENU** y aparecerá el ícono de sol (ícono de alta temperatura).
- 8) Utilice las flechas para establecer la alarma de **ALTA** temperatura (de 22 a 40 °C/de 72 a 97 °F).
- 9) Pulse el botón **SELECT** y, a continuación, **EXIT** para confirmar su selección.

YA ESTÁ LISTO PARA UTILIZAR EL MONITOR

El monitor Angelcare® puede usarse con los ajustes predeterminados de fábrica o bien personalizarse según sus preferencias.

CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS



Modo de detección:
Sonido y movimiento

73°F

Unidad de temperatura: Celsius en Canadá
Fahrenheit en EE. UU.



Alarma de temperatura: DESACTIVADO (OFF)
Configuración de la alarma de temperatura:

Alta: 30 °C / 86 °F

Baja: 19 °C / 66 °F



Modo Alarma: Solo sonido



Fuera de alcance: ACTIVADO (ON)



Transmisión de sonido (VOX):
DESACTIVADO (OFF)



IMPORTANTE

- Pruebe el monitor antes de usarlo por primera vez.
- Pruebe periódicamente el monitor para asegurarse de que funciona correctamente.
- Pruebe el monitor cada vez que coloque el detector de movimientos en un lugar diferente.

PASO 6 - ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE FUNCIONES ADICIONALES

El monitor Angelcare® puede usarse con los ajustes predeterminados de fábrica o bien personalizarse según sus preferencias.



Los cambios o ajustes que realice en el menú principal y los submenús no se activarán hasta que los confirme pulsando el botón **SELECT**, seguido del botón **EXIT**.

IMPORTANTE


Cuando se encuentre en modo de **MENÚ** o **SUBMENÚ**, **NO** se emitirá ningún sonido, alarma o vibración desde la unidad para los padres o del bebé, aunque se activen pulsando el modo de **MENÚ** o **SUBMENÚ**.

6.1 - LOCALIZADOR


Le permite localizar la unidad para los padres.

PARA LOCALIZAR LA UNIDAD PARA LOS PADRES:

Pulse y suelte el botón del **localizador** en la parte posterior de la unidad del bebé. La unidad para los padres emitirá un sonido de localización.

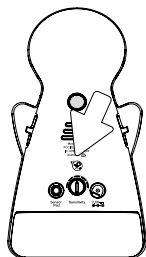


PARA DETENER EL SONIDO DE LOCALIZACIÓN:

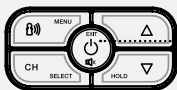

Pulse el botón de encendido de la unidad para los padres.

6.2 - LAMPARILLA DE NOCHE

Deslice el botón de lamparilla de noche en la unidad del bebé para **ENCENDER** o **APAGAR** la unidad.

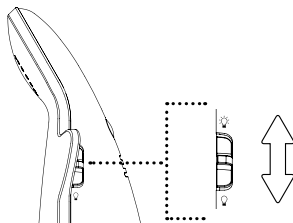


MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS RECARGABLES

- Asegúrese de cargar completamente las baterías durante 15 horas antes de usarlas por primera vez.
- Para alargar al máximo la vida de las baterías, se recomienda descargarlas periódicamente. El rendimiento de las baterías puede reducirse si se cargan constantemente. Si la unidad para los padres no está en uso, apáguela.
- Un funcionamiento inadecuado de las baterías puede afectar al funcionamiento de su monitor. Si no le satisface el funcionamiento de su unidad para los padres/monitor, cambie las baterías (3 o 6 x baterías recargables NiMH).
- Se recomienda cambiar las baterías cada 6 meses.

PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD

En el caso de pérdida de conectividad, lo primero que debe hacer es acercar la unidad para los padres y la unidad del bebé y asegurarse de que ambas están encendidas para recuperar la conexión. Si sigue sin haber conexión y no se muestra la advertencia de fuera de alcance después de haber seguido el paso anterior, entonces (y solo entonces) deberá realizarse el procedimiento de reconexión.

Procedimiento de reconexión:

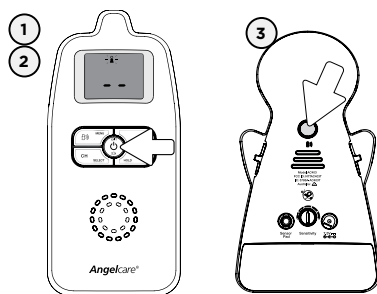

- 1) APAGUE la unidad para los padres y vuelva a ENCENDERLA. La pantalla LCD solo mostrará '—' con retroiluminación y el icono de la unidad del bebé parpadeará.
- 2) Si mantiene pulsado durante 3 segundos el botón "MENU/CONNECT" de la unidad para los padres, esta se establecerá en el modo de conectividad (oír un pitido y el icono de la antena parpadeará durante 15 segundos).
- 3) Para establecer la unidad del bebé en el modo de conectividad, mantenga pulsado el botón de localizador durante 4 segundos (en la parte trasera de la unidad del bebé). El LED de encendido parpadeará y se emitirá un pitido cuando el procedimiento de conexión termine.

NOTA:

Si el paso 3 no se realiza en el plazo correspondiente, la unidad para los padres abandonará el modo de conectividad y tendrá que volver a comenzar el proceso.

- 4) Cuando la unidad para los padres y la unidad del bebé estén conectadas, la unidad para los padres emitirá un tono de confirmación y mostrará el número del canal que será sustituido por la temperatura (pantalla normal) unos segundos más tarde.

NOTA:

Si la luz de TIC parpadea, no pulse el botón del localizador o puede que la conexión se vea interrumpida.

FALSAS ALARMAS

- Verifique la conexión entre el detector de movimientos y la unidad del bebé. Desenchufe y vuelva a conectar el cable.
- Asegúrese de que no haya ropa de cama entre el colchón y el detector de movimientos.
- Si la cuna tiene una base de resorte o listones, coloque una tabla de fibra de alta densidad entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 33 x 33 cm (13" x 13") y 6 mm (1/4") de espesor.
- Asegúrese de que el detector de movimientos se encuentre como se describe en los requisitos para la instalación. Es posible que se necesite ajustar el nivel de sensibilidad, consulte el **Paso 5.3.**

LA ALARMA NO SUENA

- Evite el contacto con la cuna cuando el monitor está **encendido**.
- Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo firme para evitar que el detector de movimientos detecte un movimiento que no provenga de la cuna.
- Es posible que necesite aumentar la sensibilidad, consulte el **Paso 5.3.**

NO SE TRANSMITE NINGÚN SONIDO

- Verifique que ambas unidades estén encendidas (**ON**).
- Compruebe que el sonido no se ha desactivado en la unidad para los padres. Aumente el nivel del volumen en la unidad para los padres, consulte el **Paso 5.5**.
- Observe la pantalla de la unidad para los padres para ver si el monitor está en modo SILENCIO temporal en lugar de en modo encendido (**ON**). Desactive la función de SILENCIO temporal, consulte el **Paso 5.6**.
- Si alguna de las unidades no recibe alimentación eléctrica, revise/reemplace las baterías, recargue la unidad para los padres y verifique que funcionen los adaptadores de CA. Si es necesario, cambie los tomacorrientes.
- Acerque la unidad para los padres a la unidad del bebé.

EL INDICADOR DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD DEL BEBÉ (LUZ VERDE) NO SE ILUMINA

- ACTIVE el interruptor que está detrás del "ala" izquierda.
- Revise las conexiones o utilice otro tomacorriente.

RECEPCIÓN DÉBIL

- Acorte la distancia entre ambas unidades.
- Cambie la posición de una o de ambas unidades.
- Coloque las unidades en una superficie plana lejos del alcance del bebé.
- Reemplace las baterías o recargue la unidad para los padres.

ESTÁTICA, DISTORSIÓN, INTERFERENCIAS (DE OTROS MONITORES, TELÉFONOS INALÁMBRICOS, RADIOTRANSMISORES PORTÁTILES, ETC.)

- Gire la unidad para los padres o aléjela de la fuente de interferencia.
- Pruebe un canal distinto, consulte el **Paso 4**.

ACOPLE (RUIDOS FUERTES EMITIDOS POR LA UNIDAD PARA LOS PADRES)

- Aleje las unidades (colóquelas a, al menos, 3 metros [10 pies de distancia]).
- Baje el volumen de la unidad para los padres.

LA PANTALLA DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES ESTÁ EN NEGRO (UNIDAD PARA LOS PADRES APAGADA)

- Encienda la unidad para los padres nuevamente manteniendo presionado el botón de **encendido**.
- Reemplace las baterías o recargue la unidad para los padres.

Si sufre algún problema no indicado en este manual, no devuelva el producto a la tienda. Si no está completamente satisfecho o si tiene preguntas:

Estados Unidos y Canadá: Póngase en contacto con nosotros en: angelcare@cdecinc.ca

Otros países: Póngase en contacto con su distribuidor local.

Puede que tengamos una solución sencilla para su problema.

GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al propietario original de este producto que el monitor de movimientos y sonidos recargable Angelcare® (modelo AC403) no contiene defectos en los materiales ni en el proceso de fabricación durante un (1) año (no se incluyen baterías recargables) a partir de la fecha de compra original. Si este sistema de supervisión no funciona correctamente cuando se utiliza según las instrucciones en condiciones normales dentro del período de un año, Angelcare® reparará o reemplazará el producto, a nuestra discreción, en forma gratuita. Comuníquese con su distribuidor.

El producto debe estar acompañado del comprobante de compra, ya sea una factura de venta o cualquier comprobante que demuestre que el sistema de supervisión se encuentra en el período de garantía. Angelcare® se hará cargo del costo de la reparación o del reemplazo del producto, y del envío de regreso a usted.

Esta garantía no se aplica a productos dañados como resultado del mantenimiento incorrecto, de un accidente, de voltaje de alimentación incorrecto o de otra forma de uso indebido. Asimismo, la garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto de cualquier manera. Angelcare® no es responsable de los daños incidentales o emergentes relacionados con este producto. La garantía también excluye toda responsabilidad que no se mencione anteriormente. No se otorga ninguna otra garantía.

Esta garantía no cubre productos ni accesorios que no sean de marca Angelcare, ni problemas derivados de un uso no acorde a las instrucciones del producto, del incumplimiento de las instrucciones del producto, o de problemas causados por el uso de accesorio, piezas o componentes no suministrados por Angelcare.

LOS DERECHOS LEGALES DEPENDEN DEL PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A USTED.

NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

IMPORTANTE

Este monitor Angelcare® es un producto de cuidado personal. No devuelva el producto a la tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a su distribuidor antes de regresar el producto.

REGISTRO DE LOS PRODUCTOS ANGELCARE

Registre el monitor Angelcare® y otros productos Angelcare® en nuestro sitio Web: www.angelcarebaby.com

ANGELCARE MONITORS INC.
9975, avenue De Catania, Local B
Brossard, Québec, Canadá
J4Z 3V6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance:

Campo abierto (zona abierta sin obstáculos): hasta 250 metros (820 pies).

Número de canales:

EE. UU./Canadá: 8 canales.
Europa: 8 canales.

Fuente de alimentación:

4 baterías AAA alcalinas (no se incluyen) o un adaptador de 100-240 V de CA/7,5 V de CC para la unidad del bebé.

3 o 6 baterías AAA recargables (no se incluyen) y un adaptador de 100-240 V de CA/7,5 V de CC para la unidad para los padres.

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvia ni a humedad.

Si las baterías se reemplazan incorrectamente, existe riesgo de explosión.

Se incluyen las siguientes baterías: 3 o 6 baterías AAA recargables Ni-MH, fabricadas por GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1,2V 600 mAh) o por HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1,2 V 600 mAh).

Solo se pueden reemplazar por 3 o 6 baterías AAA recargables Ni-MH.

Baterías:

- NO mezcle las baterías usadas con las nuevas.
- NO mezcle las baterías alcalinas estándar (zinc-carbono) o recargables (Ni-CD, Ni-MH, etc.).

Transmisión

La transmisión de ajustes de la unidad para los padres a la unidad del bebé se realiza en una frecuencia de 2,4 GHz. La transmisión de la unidad del bebé a la unidad para los padres se realiza en la frecuencia 864 MHz en Europa/Asia/África y en la frecuencia de 927 MHz en Norteamérica/Ecuador/Oceanía.

Por este medio, Angelcare Monitors Inc, declara que este monitor para bebés cumple con los requisitos básicos y con otras disposiciones pertinentes de la Directriz 1999/5/EC.

Puede solicitar la Declaración de conformidad de la Unión Europea a su distribuidor local. Consulte la dirección en el manual.



PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE

Este equipo electrónico contiene material reutilizable y no se debe desechar junto a los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos (pida más información a las autoridades locales).

CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA ERP

SUDÁFRICA - BRASIL - ECUADOR - UNIÓN EUROPEA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare®; número de modelo: T07505V001

ALEMANIA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare®; número de modelo: T07505F002

AUSTRALIA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare®; número de modelo: T07505S002

NORTEAMÉRICA

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare®; número de modelo: T07505U002

REINO UNIDO - MALTA - ASIA - CHIPRE

Use solamente la fuente de alimentación de la marca Angelcare®; número de modelo: T07505B001

www.angelcarebaby.com



IM403-NA-041015